




STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

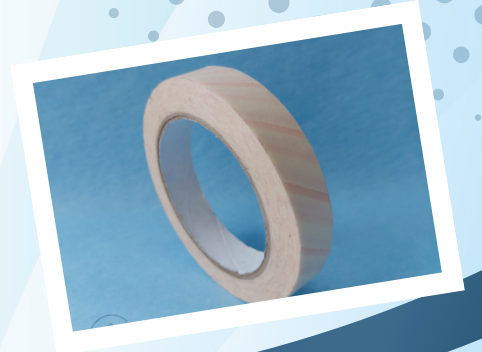

www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

HAKKIMIZDA

Sterivision, 2022 yılında sterilizasyon sarf malzemeleri üretimi için kurulmuş ve aynı yıl üretime başlamıştır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen, pazarlama, iharacat ve üretim konusunda 10 yılı aşkın deneyime sahip bir ekip tarafından yönetilmektedir. Bu deneyim sayesinde, sterilizasyon sarf malzemeleri sektöründe müşterilerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini en yakından bilmekte ve bu talepler doğrultusunda ürünlerini üretmekte ve geliştirmektedir.

Sterilizasyon departmanlarında yaşanan sıkıntıları yakından bilen pazarlama ve ar-ge ekibi, üretim konusunda oldukça tecrübeli ekiple koordineli olarak hareket etmektedir. Bu sayede, son kullanıcıya ihtiyacına uygun ve etkili bir şekilde sterilizasyon işlemini gerçekleştirme imkanı sunuyoruz.

Firmamızın hedefi, müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla, sterilizasyon sarf malzemeleri sektöründe lider bir konumda yer almaktır. Bu doğrultuda, yüksek kaliteli ürünlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerimizin güvenini kazanmak için çalışmaktayız.

ABOUT US

Sterivision was established in 2022 for the production of sterilization consumables and started its production in the same year. Although newly established, it is managed by a team with more than 10 years of experience in marketing, export, and production. Thanks to this experience, it understands the needs and demands of its customers in the sterilization consumables sector and manufactures and develops its products in line with these demands.

The marketing and R&D team, which are closely aware of the problems experienced in the sterilization departments, act in coordination with the highly experienced production team. In this way, we offer the end-user the opportunity to perform the sterilization process in accordance with their needs and effectively.

The goal of our company is to take a leading position in the sterilization consumables sector with a customer satisfaction-oriented approach. To achieve this, we work to gain the trust of our customers with our high-quality products and customer-oriented service approach.

Type 4 Buhar Kimyasal İndikatörü Type 4 Steam Chemical Indicator



SV Type 4 Buhar Kimyasal İndikatörü, sterilizasyon departmanlarında sterilizasyon işleminin etkinliğini izlemek için kullanılan bir kimyasal indikatör türüdür. İndikatör sterilizasyon döngüsünde, buhara maruz kaldığında renk değiştirir ve sıcaklık ile maruz kalma süresi gibi sterilizasyon koşullarının karşılanıp karşılanmadığını gösterir.

SV Type 4 Steam Chemical Indicator is a type of chemical indicator used to monitor the effectiveness of the sterilization process in CSSD Departments. During sterilization cycle, the indicator changes color when exposed to steam and indicates whether the sterilization conditions were met, such as temperature and exposure time.

Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü Type 6 Steam Chemical Indicator

SV Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü, sterilizasyon işlemlerinde 3 sterilizasyon parametresinin (süre, sıcaklık ve basınç) karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için kullanılır, buhara maruz kaldığında renk değiştirerek sterilizasyon işleminin başarılı olduğunu gösterir.

Type 6 Kimyasal İndikatörü 3,5dk. 134 °C'de 3,5 dakikaya kadar ve 121 °C'de 15 dakikaya kadar // 7dk. 134 °C'de 7 dakikaya kadar ve 121 °C'de 20 dakikaya kadar renk değiştirir.

SV Type 6 Steam Chemical Indicator is used in sterilization processes to indicate whether the 3 sterilization parameters (time, temperature, and pressure) have been met, it works by changing color when exposed to steam, indicating that the sterilization process has been successful.

Type 6 Chemical Indicators 3,5min. change colours at 134 °C up to 3,5 minutes and at 121 °C up to 15 minutes // 7min. change colours at 134 °C up to 7 minutes and at 121 °C up to 20 minutes.





STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Type 5 Buhar Kimyasal İndikatörü-Renk Değiştiren Type 5 Steam Chemical Indicator-Color Change



SV Type 5 Buhar Kimyasal İndikatörü sterilizasyon döngüsü esnasında zaman, sıcaklık ve basınç parametrelerinin varlığını ya da yokluğunu belirten indikatörlerdir. Type 5 Kimyasal İndikatörü 121 °C ve 134 °C sıcaklık standartlarına göre üretilmektedir. Type 5 Kimyasal İndikatör bütün parametrelerin varlığında indikatör renginin, referans rengine dönmesiyle sonuç verir.

SV Type 5 Steam Chemical Indicators are indicators that indicate the presence or absence of time, temperature and pressure parameters during the sterilization cycle. Type 5 Chemical Indicator is produced according to temperature standards of 121 °C and 134 °C.

Type 5 Chemical Indicator gives results when the color of the indicator turns to the reference color in the presence of all parameters.

Type 5 Buhar Kimyasal Entegratörü - İlerlemeli Type 5 Steam Chemical Integrator- with Window

SV Type 5 Buhar Kimyasal Entegratörü sterilizasyon döngüsü esnasında biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediğini bildiren göstergedir. Bu sebeple biyolojik indikatöre en yakın sonuç veren indikatör türüdür.

Ürün üzerindeki penceredeki barın, kabul bölgesine geçmesi sterilizasyon işleminin başarılı olduğunu gösterir. İlerleme gerçekleşmemişse, sterilizasyon işlemi başarısızdır.

SV The Type 5 Steam Chemical Integrator is an indicator that indicates whether biological death has occurred during the sterilization cycle. For this reason, it is the type of indicator that gives the closest result to the biological indicator. If the bar on the window on the product passes into the acceptance area, it indicates that the sterilization process was successful. If no progress has taken place, the sterilization process is unsuccessful.



www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Perforeli Kimyasal İndikatörler Perforated Chemical Indicators

SV Perforeli Kimyasal İndikatörler, sterilizasyon departmanlarında, sterilizasyonunun etkinliğini izlemek için kullanılan indikatörlerdir.

Perforeli Kimyasal İndikatörler diğer indikatörlerden uzundur ve aynı strip üzerinde kolayca ayrılabilen 2 indikatörden oluşur.

SV Perforated Chemical Indicators are indicators used in sterilization departments to monitor the effectiveness of sterilization.

Perforated Chemical Indicators are longer than other indicators and consist of 2 indicators that can be easily separated on the same strip.

Kendinden Yapışkanlı Kimyasal İndikatörler Self-Adhesive Chemical Indicators

SV Kendinden Yapışkanlı Kimyasal İndikatörler, içerdiği yapışkan şerit sayesinde, indikatörün yük üstüne yapıştırılmasını sağlar. Bütün kimyasal indikatörlerin yapışkan özellikli türü de mevcuttur.

SV Self-Adhesive Chemical Indicators allow the indicator to be adhered to the load, thanks to the adhesive strip it contains. All chemical indicators are also available in adhesive type.



www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Etilen Oksit Kimyasal İndikatörü Etyhlene Oxide Chemical Indicator

SV EO kimyasal indikatörü, etilen oksit gazı kullanan sterilizasyon işlemlerinin etkinliğini kontrol etmek için kullanılan bir tür görüntüleme ürünüdür. EO kimyasal indikatörleri, etilen oksit gazına maruz kaldığında renk değiştirerek çalışır. Bu, gazın sterilize edilmekte olan pakete veya kaba nüfuz ettiğini ve bu nedenle sterilizasyon işleminin başarılı olduğunu gösterir.

SV EO chemical indicator is a type of monitoring device used to ensure the effectiveness of sterilization processes that use ethylene oxide gas. EO chemical indicators work by changing colour when exposed to ethylene oxide gas. This indicates that the gas has penetrated the package or container being sterilized, and therefore the sterilization process has been successful.



Plazma(H₂O₂) Kimyasal İndikatörü Plasma (H₂O₂) Chemical Indicators

SV Plazma(H₂O₂) kimyasal indikatörleri, tıbbi ekipman ve sarf malzemelerinin plazma sterilizasyonu kullanılarak etkin bir şekilde sterilize edildiğinden emin olmak için kullanılan indikatörlerdir. Bu indikatörler, sterilizasyon işlemine duyarlıdır ve plazmaya maruz kaldığında renk değiştirerek sonuç gösterir.

SV Plasma(H₂O₂) chemical indicators are indicators used to ensure that medical equipment and consumables are effectively sterilized using plasma sterilization. These indicators are sensitive to the sterilization process and show results by changing color when exposed to plasma.



www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Bowie Dick Test Paketi Bowie Dick Test Pack

SV Bowie Dick Test Paketi, bir tür sterilizasyon sürecini zorlama testidir. Buharın indikatöre sızmasını zorlaştıran yapraklar ve belirli koşullar altında buhara maruz kaldığında renk değiştiren bir kimyasal indikatör kartından oluşur. Test tipik olarak günün ilk yükünde gerçekleştirilir ve otoklavın tıbbi ekipmanı veya malzemeleri sterilize etmek için kullanılmadan önce düzgün çalıştığını doğrulamak için kullanılır.

SV Bowie Dick Test Pack is a type of sterilization challenge test. It consists of sheets that make it difficult for steam to leak into the indicator, and a chemical indicator card that changes color when exposed to steam under certain conditions. The test is typically performed at the first load of the day and is used to verify that the autoclave is working properly before it is used to sterilize medical equipment or supplies.



PCD-Helix Yük Kontrol Testi PCD-Helix Load Check Test

SV PCD – Helix Yük Kontrol Testleri buharın test bölgesine ulaşmasını engelleyerek sterilizasyon sürecini zorlaştırır. PCD 1 metrelik, Helix 1,5 metrelik hortum içerir. Hortumun ucunda içinde kendinden yapışkanlı indikatörler içeren bir tüp bulunur. Buharın bu hortumun içinden sızıp, hortumun sonundaki indikatöre ulaşıp, indikatörün rengini değiştirmesi başarılı sonuçtur.

SV PCD – Helix Load Control Tests make the sterilization process difficult by preventing steam from reaching the test area. Includes PCD 1 meter hose, Helix 1.5 meter hose. At the end of the hose there is a tube includes self-adhesive indicators inside. The successful result is that steam leaking through this hose, reaching the indicator at the end of the hose and changing the color of the indicator.




www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Otoklav Bantları Autoclave Tapes

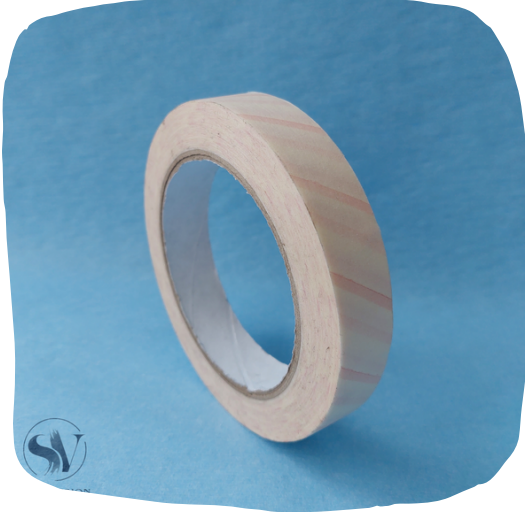

SV Sterilizasyon İndikatör Bantları, bir sterilizasyon paketinin sterilizasyon işlemine tabi tutulup tutulmadığını belirtmek için kullanılan yapışan kağıt rulolarıdır. Sterilizasyon Bantları buhar, etilen oksit ve plazma sterilizasyon metotlarında uygun koşullar sağlandığında renk değiştiren indikatörler içerir. Bant, sterilizasyondan önce ürüne veya pakete yapıştırılır ve sterilizasyon başarılı olursa, bant renk değiştirir.

SV Sterilization Indicator Tapes are rolls of sticky paper used to indicate whether a sterilization package has undergone the sterilization process. Sterilization Tapes contain indicators that change color when suitable conditions are met in steam, ethylene oxide and plasma sterilization methods. The tape is adhered to the product or package before to sterilization, and the tape will change color if sterilization is successful.

Ultrasonik Yıkama Cihazı İndikatörü Ultrasonic Washing Machine Indicator

SV Ultrasonik Yıkama Cihazı İndikatörü, ultrasonik yıkama cihazının etkinliğini control etmek için kullanılan indikatörlerdir.

SV Ultrasonic Washing Device Indicator are indicators used to control the effectiveness of the ultrasonic washing device.



www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Yıkama Kontrol Testi Washing Control Test

SV Yıkama Kontrol Testi, cerrahi aletlerin sterilizasyondan önce yıkama işlemlerinde, yıkama cihazının ve kullanılan yıkama solüsyonlarının etkinliğini kontrol etmek için kullanılan indikatörlerdir. Yıkama işleminden sonra indikatör üzerindeki karışımın tamamen silinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yıkama işlemi başarısızdır ve tekrarlanmalıdır.

SV Washing Control Test are indicators used to control the effectiveness of the washing device and the washing solutions used in the washing processes of surgical instruments before sterilization. After washing, the mixture on the indicator must be completely wiped. Otherwise, the washing process is unsuccessful and must be repeated.



Protein Kalıntı Testi Protein Residue Test

SV Protein Kalıntı Testi, yıkama işleminden sonra cerrahi aletlerin üzerinde protein varlığını ve ya yokluğunu tespit etmek için kullanılan indikatördür. Bir swab yardımıyla, cerrahi aletin üzerinden sürüntü alınır ve bu numune tüp içindeki özel çözeltiliye daldırılır. Bir miktar beklenilir ve çözeltideki renk değişimi gözlemlenir.

SV Protein Residue Test is an indicator used to detect the presence or absence of protein on surgical instruments after washing. With the help of a swab, a wipe sample is taken from the surgical instrument and this sample is dipped into the special solution in the tube. After a while, the color change in the solution is observed.



www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Biyolojik İndikatörler Biological Indicators



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Sterilizasyon Biyolojik İndikatörü (BI), sterilizasyon işlemlerinin etkinliğini doğrulamak için kullanılan en güvenilir ve en doğru sonucu veren göstergedir. Tipik olarak, kullanılan sterilizasyon işlemine oldukça dirençli küçük bakteri sporları ve sterilizasyondan sonra bu sporların karışması için sıvı içeren kapsülden oluşan bir tüptür. Bu sporlar, sterilizasyon kazanı ya da otoklav içinde, öldürmenin en zor olacağı bir konuma yerleştirilir.

Sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra BI, sterilizatörden çıkarılır ve sporların büyümesini destekleyen bir kültür ortamında inkübe edilir. Sporlar sterilizasyon işlemiyle öldürülmüşse, kültür ortamında üreme olmayacaktır. Sporlar hayatta kaldıysa büyüyecek ve sterilizasyon işleminin etkili olmadığını göstereceklerdir.

Sterilizasyon Biyolojik İndikatörleri, hastaneler, laboratuvarlar ve endüstriyel üretim tesisleri gibi sterilizasyonun kritik olduğu çeşitli ortamlarda kullanılır. Sterilizasyon işlemlerinin düzgün çalışmasını ve alet ve ekipmanların kullanım için güvenli olmasını sağlamada önemli bir araçtır.

Sterilization Biological Indicator (BI) is the most reliable and accurate indicator used to verify the effectiveness of sterilization processes. It typically consists of a small, self-contained package containing bacterial spores that are highly resistant to the sterilization process being used. These spores are placed in a location within the sterilization chamber where they would be expected to be the most difficult to kill.

After the sterilization process is complete, the BI is removed from the sterilization chamber and incubated in a culture medium that promotes the growth of the spores. If the spores have been killed by the sterilization process, there will be no growth in the culture medium. If the spores have survived, they will grow and indicate that the sterilization process was not effective.

Sterilization BIs are used in a variety of settings where sterilization is critical, such as hospitals, laboratories, and industrial manufacturing facilities. They are an important tool in ensuring that sterilization processes are working properly and that instruments and equipment are safe for use.



www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Sterilizasyon Dökümantasyonu Etiket Tabancası Sterilization Documentation Label Gun



SV Sterilizasyon Dökümantasyonu Etiket Tabancası, tıbbi ekipmanın sterilizasyon sürecini izlemeye ve belgelemeye yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır. Son kullanma tarihi, operator kodu ve sterilizasyon döngü no gibi bilgileri daha sonra sterilize edilecek ekipmana yapıştırılan yapışkan etiketlere yazdırabilen bir etiket yazıcısıdır. Etiket tabancası tarafından sağlanan belgeler, tıbbi personelin ekipmanın en son ne zaman sterilize edildiğini ve ne zaman tekrar sterilize edilmesi gerektiğini takip etmesine de yardımcı olur.

SV Sterilization Documentation Label Gun is a tool used to help monitor and document the sterilization process of medical equipment. It is a label printer that can print information such as expiration date, operator code and sterilization cycle number on adhesive labels that are attached to the equipment to be sterilized later. Documentation provided by the label gun also helps medical personnel keep track of when equipment was last sterilized and when it needs to be re-sterilized.

Buhar Dökümantasyon Etiketi Steam Documentation Label

SV Buhar Dökümantasyon Etiketi, buhar sterilizasyonunda, son kullanma tarihi, sterilizasyon döngü numarası, kullanıcı kodu gibi bilgilerin üzerine yazdırılabileceği, çift taraflı kendinden yapışkanlı ve buhar indikatörü içeren etikettir. Etiket üzerindeki indikatör Type 1 indikatörüdür ve renk değiştirerek sonuç vermektedir.

SV Steam Documentation Label is a double-sided self-adhesive label containing steam indicator on which information such as expiry date, sterilization cycle number, user code can be printed on steam sterilization. The indicator on the label is Type 1 and it gives results by changing color.



www.sterivision.com.tr




STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Etilen Oksit Dökümantasyon Etiketi Ethylene Oxide Documentation Label

SV Etilen Oksit Dökümantasyon Etiketi, etilen oksit sterilizasyonunda, son kullanma tarihi, sterilizasyon döngü numarası, kullanıcı kodu gibi bilgilerin üzerine yazdırılabileceği, çift taraflı kendinden yapışkanlı ve EO indikatörü içeren etikettir. Etiket üzerindeki indikatör Type 1 indikatörüdür ve renk değiştirerek sonuç vermektedir.


SV Ethylene Oxide Documentation Label is a double-sided self-adhesive label containing EO indicator on which information such as expiry date, sterilization cycle number, user code can be printed on EO sterilization. The indicator on the label is Type 1 and it gives results by changing color.

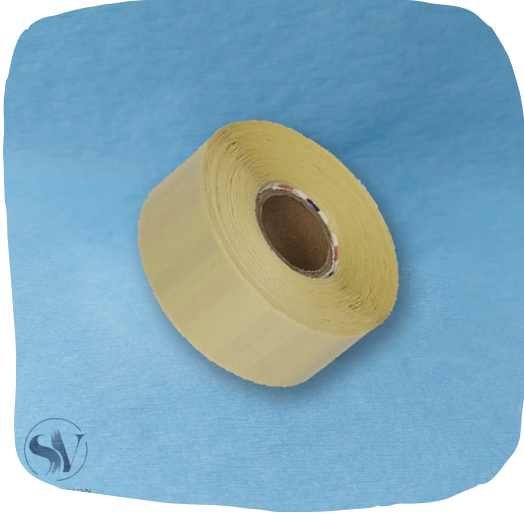

Plazma (H₂O₂) Dökümantasyon Etiketi Plasma (H₂O₂) Documentation Label

SV Plazma (H₂O₂) Dökümantasyon Etiketi, plazma sterilizasyonunda, son kullanma tarihi, sterilizasyon döngü numarası, kullanıcı kodu gibi bilgilerin üzerine yazdırılabileceği, çift taraflı kendinden yapışkanlı ve plazma indikatörü içeren etikettir. Etiket üzerindeki indikatör Type 1 indikatörüdür ve renk değiştirerek sonuç vermektedir.

SV Plasma (H₂O₂) Documentation Label is a double-sided self-adhesive label containing plasma indicator on which information such as expiry date, sterilization cycle number, user code can be printed on plasma sterilization. The indicator on the label is Type 1 and it gives results by changing color.

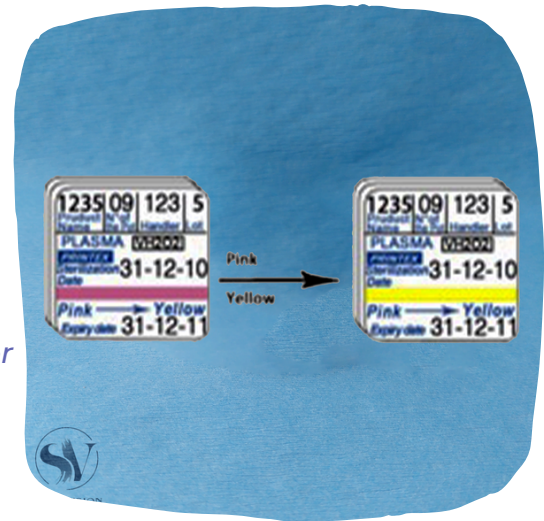




STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Konteyner Güvenilk Kilidi Container Security Seal

Konteyner Güvenilk Kilidi, sterilizasyon konteynerlerinin nakliye ve ya depolama aşamasında açılmadığından ve steril edilen malzemenin sterilliğini koruduğundan emin olmak için kullanılan mühürlerdir. Bu mühür ancak kırılarak açılabilir. İndikatörlü ve indikatörsüz olmak üzere üretilmektedir.

SV Container Security Seal is lock used to ensure that sterilization containers are not opened during transportation or storage and that the sterilized material remains sterile. This seal can only be opened by breaking it. It is produced with and without an indicator.

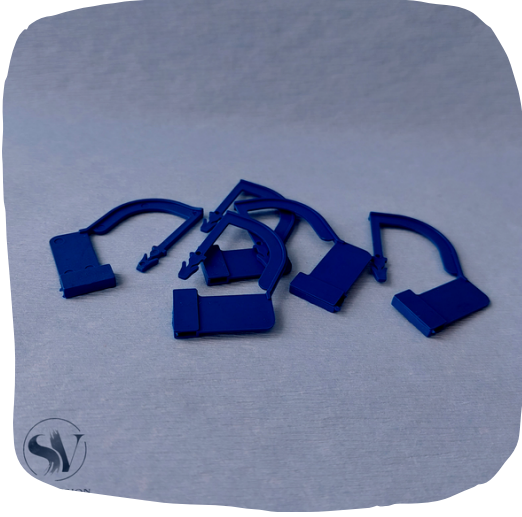

Sterilizasyon Konteyner Etiketi Sterilization Container Label

SV Sterilizasyon Konteyner Etiketi, sterilizasyonu için kullanılan konteynera yapıştırılan, sterilizasyonun tarihi ve son kullanım tarihi, sterilizasyon kayıt numarası, kabın içeriği gibi bilgileri ve indikatör içeren bir etikettir. Sterilizasyon konteyner etiketleri, tıbbi ekipman ve sarf malzemelerinin güvenliğini ve etkinliğini sağlamanın önemli bir bileşenidir ve sağlık hizmeti ortamlarında yaygın olarak kullanılır.

SV Sterilization Container Label is a label attached to the container used for sterilization, containing information such as sterilization date and expiry date, sterilization registration number, contents of the container, and an indicator.

Sterilization container labels are an essential component of ensuring the safety and efficacy of medical equipment and supplies, and are commonly used in healthcare settings.



www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Sterilizasyon Düz Ruloları Sterilization Flat Reels

SV Sterilizasyon Düz Rulosu, 60/70 gsm medikal kağıt ve 52 micron filmin birleştirilip makara haline getirilerek üretilen, sterilizasyon işleminde cerrahi aleti paketlemeye yarayan ve sterilizasyon sonrasında da sterilliğin bozulmasını engelleyen paketleme ürünüdür. Ruloların kenarında Buhar, Etilen Oksit ve Formaldehit indikatörleri bulunur ve bu indikatörler paketin sterilizasyona girip girmediğini gösterir.

SV Sterilizasyon Ruloları ISO 11607 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

SV Sterilization Flat Reel is a packaging product that is produced by combining 60/70 gsm medical paper and 52 micron film and reeling, to pack the surgical instrument in the sterilization process and to prevent the deterioration of sterility after sterilization. There are Steam, Ethylene Oxide and Formaldehyde indicators on the edge of the rolls and these indicators show whether the package has undergone sterilization.

SV Sterilization Rolls are produced in accordance with ISO 11607 standards.

Sterilizasyon Düz Zarfları Sterilization Flat Pouches

SV Sterilizasyon Düz Zarfları, 60/70 gsm medikal kağıt ve 52 micron filmin birleştirilip belirtilen ebatlarda kesilerek üretilen, sterilizasyon işleminde cerrahi aleti paketlemeye yarayan ve sterilizasyon sonrasında da sterilliğin bozulmasını engelleyen paketleme ürünüdür. Zarfların kenarında Buhar, Etilen Oksit ve Formaldehit indikatörleri bulunur ve bu indikatörler paketin sterilizasyona girip girmediğini gösterir.

SV Sterilizasyon Zarfları ISO 11607 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

SV Sterilization Flat Pouches are packaging products that are produced by combining 60/70 gsm medical paper and 52 micron film and cutting them into specified sizes, to pack the surgical instrument in the sterilization process and to prevent the deterioration of sterility after sterilization. There are Steam, Ethylene Oxide and Formaldehyde indicators on the edge of the envelopes and these indicators show whether the package has undergone sterilization.

SV Flat Pouches are produced in accordance with ISO 11607 standards.



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS



www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Tyvek Ruloları Tyvek Reels

SV Tyvek Ruloları, Plazma Sterilizasyonunda kullanılmak üzere 60 gsm Tyvek Kağıt ve 52 micron beyaz filmin birleştirilip makara haline getirilerek üretilen, sterilizasyon işleminde cerrahi aleti paketlemeye yarayan ve sterilizasyon sonrasında da sterilliğin bozulmasını engelleyen paketleme ürünüdür. Ruloların kenarında Plazma indikatörleri bulunur ve bu indikatörler paketin sterilizasyona girip girmediğini gösterir.

SV Tyvek Ruloları ISO 11607 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

SV Tyvek Reels are a packaging product is to be used in Plasma Sterilization and is produced by combining 60 gsm Tyvek Paper and 52 micron white film and reeling, to pack the surgical instrument in the sterilization process and to prevent the deterioration of sterility after sterilization. There are Plasma indicators on the edge of the rolls and these indicators show whether the package has undergone sterilization.

SV Tyvek Reels are produced in accordance with ISO 11607 standards.

Tyvek Zarfları Tyvek Pouches

SV Tyvek Zarfları, Plazma Sterilizasyonunda kullanılmak üzere 60 gsm Tyvek Kağıt ve 52 micron beyaz filmin birleştirilip belirtilen ebatlarda kesilerek üretilen, sterilizasyon işleminde cerrahi aleti paketlemeye yarayan ve sterilizasyon sonrasında da sterilliğin bozulmasını engelleyen paketleme ürünüdür. Zarfların kenarında Plazma indikatörleri bulunur ve bu indikatörler paketin sterilizasyona girip girmediğini gösterir.

SV Tyvek Zarfları ISO 11607 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

SV Tyvek Pouches are a packaging product is to be used in Plasma Sterilization and is produced by combining 60 gsm Tyvek Paper and 52 micron white film and cutting them into specified sizes, to pack the surgical instrument in the sterilization process and to prevent the deterioration of sterility after sterilization. There are Plasma indicators on the edge of the pouches and these indicators show whether the package has undergone sterilization.

SV Tyvek Pouches are produced in accordance with ISO 11607 standards.



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS



www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS

Krep Kağıdı Crepe Paper

SV Sterilizasyon Krep Kağıdı, sterilizasyon işlemi sırasında tıbbi ekipmanı ve sarf malzemelerini sarmak ve korumak için kullanılan tıbbi kullanıma uygun bir kağıt türüdür. İçeriğin sterilitesini bozmadan veya yırtmadan sterilizasyon sırasında yüksek sıcaklıklara ve basınca dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Krep kağıdı, sarıldıktan sonra güvenli bir şekilde kapatılmasına izin veren otoklav bantları ile kaplanır. Sterilizasyon krep kağıdı, tıbbi ekipman ve malzemelerin temizliğini ve sterilliğini korumak için hastanelerde, kliniklerde ve diğer sağlık hizmeti ortamlarında yaygın olarak kullanılır.

SV Sterilization Crepe Paper is a type of medical-grade paper that is used to wrap and protect medical equipment and supplies during the sterilization process. It is designed to withstand high temperatures and pressure during sterilization without tearing or compromising the sterility of the contents. The crepe paper is covered with autoclave tapes that allow it to be securely closed after being rolled up. Sterilization crepe paper is commonly used in hospitals, clinics, and other healthcare settings to maintain the cleanliness and sterility of medical equipment and supplies.



SMS Kağıdı SMS Paper

SV Sterilizasyon SMS Kağıdı, sterilizasyon işlemi sırasında tıbbi ekipmanı ve sarf malzemelerini sarmak ve korumak için kullanılan tıbbi kullanıma uygun bir kağıt türüdür. İçeriğin sterilitesini bozmadan veya yırtmadan sterilizasyon sırasında yüksek sıcaklıklara ve basınca dayanacak şekilde tasarlanmıştır. SMS kağıdı, sarıldıktan sonra güvenli bir şekilde kapatılmasına izin veren otoklav bantları ile kaplanır. Sterilizasyon SMS kağıdı, tıbbi ekipman ve malzemelerin temizliğini ve sterilliğini korumak için hastanelerde, kliniklerde ve diğer sağlık hizmeti ortamlarında yaygın olarak kullanılır.

SV Sterilization SMS Paper is a type of nonwoven paper that is used to wrap and protect medical equipment and supplies during the sterilization process. It is designed to withstand high temperatures and pressure during sterilization without tearing or compromising the sterility of the contents. The SMS paper is covered with autoclave tapes that allow it to be securely closed after being rolled up. Sterilization SMS paper is commonly used in hospitals, clinics, and other healthcare settings to maintain the cleanliness and sterility of medical equipment and supplies.



www.sterivision.com.tr

İLETİŞİM / CONTACT



Ceyhun Atuf Kansu Cad. Ehlibeyt Mah. 1270. Sokak
Gizem Apt. No:1/4 Balgat
Çankaya / Ankara



+90 312 472 55 60



info@sterivision.com.tr
export@sterivision.com.tr



www.sterivision.com.tr



STERI VISION
STERILIZATION PRODUCTS